



JOBST® Sport

TIPO PRODUCTO

Jobst Sport es un calcetín atlético, suave y energizante para un estilo de vida activo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Planta de pie acolchada que** amortigua el impacto proporcionando un mayor confort.
- **Protección del Tendón de Aquiles** gracias a una zona almohadada que previene las lesiones durante el ejercicio
- **Carbono activo integrado en la planta del pie** que proporciona un sistema de control de olor natural y biológicamente neutro, que permite que el pie permanezca fresco y seco sin dañar la flora bacteriana.
- **Puntera con costura plana**, lo que hace que su uso prolongado sea muy confortable.
- **Banda de sujeción ancha y elástica** que sujeta el calcetín sin constreñir.
- Confeccionado con hilos extra suaves que le dan un tacto muy confortable.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Los calcetines deben lavarse diariamente o, al menos, cada dos días.
- Debe utilizarse un detergente normal suave. No utilice aditivos de lavado como suavizante, lejía o quitamanchas.
- Lavar con agua a una temperatura máxima de 40°C.
- Aclarar bien los calcetines de compresión y enrollarlos en una toalla para quitarles el

INDICACIONES

Clase I:

- Varicosis menor.
- Piernas cansadas y doloridas.
- Edema incipiente de pie y tobillo.
- Post-escleroterapia.
- Prevención de la patología en casos de riesgo (trabajos en bipedestación prolongada, embarazos repetitivos, antecedentes familiares....).

Clase II:

- Varicosis de moderada a severa.
- Post-operatorio.
- Edema moderado.
- Post-escleroterapia.
- Varices moderadas durante embarazo.
- Tromboflebitis superficial.
- Prevención de recurrencia de úlceras

MODO DE ACCIÓN

- Facilitan la función valvular por aproximación de las válvulas: se unen las válvulas por la presión externa.
- Aumentan la velocidad de flujo sanguíneo: al reducir la luz de la vena la velocidad de la sangre que circula por ella aumenta.
- Mejoran la función capilar: por reducción de la presión de reflujo los capilares son capaces de absorber mejor los fluidos.
- Reducen el edema

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ponga el calcetín completamente del revés. Abra la parte doblada de la zona del pie usando las dos manos y suba el calcetín cubriendo el pie hasta el talón.
 2. Tire gradualmente del calcetín para subirlo por el empeine y el talón.
 3. A continuación, suba gradualmente el calcetín de compresión por la pierna poniéndolo poco a poco derecho.
- Distribuir el calcetín uniformemente masajeadando con ambas manos hasta que estén ajustados sin formar arrugas. Resulta conveniente en este punto ponerse guantes de goma

exceso de humedad. No escurrirlos. No secarlos en radiadores o expuestos a la luz directa del sol.

RECOMENDACIONES DE USO

- El producto debe ponerse en los momentos de actividad deportiva en sustitución de las medias compresivas habituales.
- Evitar el uso del producto junto a ungüentos grasos, lociones corporales grasas o sustancias similares a menos que estén recomendadas por el fabricante.
- Se recomienda lavar la prenda cada día o al menos cada dos días.
- Las uñas largas y joyas pueden dañar la prenda a la hora de ponerlas.
- Los hilos flojos o sueltos no deben cortarse puesto que pueden formar agujeros o carreras en los calcetines.
- Las heridas abiertas deben cubrirse convenientemente antes de ponerse los calcetines.
- El uso de calcetines de una talla inadecuada o una mala colocación de los mismos puede causar problemas

COMPOSICIÓN

- Nylon
- Poliéster
- Elastano


PRESENTACIÓN



MEDIA AD

Calcetín

COLORES

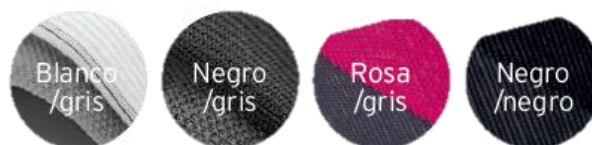

BLANCO/GRIS NEGRO/GRIS ROSA/GRIS NEGRO/NEGRO

TABLA DE MEDIDAS

	S	M	L	XL
cC	28 – 38 cm	30 – 42 cm	32 – 46 cm	34 – 50 cm
cB	18 – 21 cm	21 – 25 cm	25 – 29 cm	29 – 33 cm

UNIDAD DE COMPRA





1ª unidad de compra
1 unidad

Clase I - 15-20 mmHg

Código de producto	Código Nacional	Tallas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	EAN Unidad
75289-20	183183.5	Talla 2	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475388
75289-21	183184.2	Talla 3	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475401
75289-22	183185.9	Talla 4	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475425
75289-23	183187.3	Talla 5	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475449
75289-30	183188.0	Talla 2	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475463
75289-31	183189.7	Talla 3	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475487
75289-32	183190.3	Talla 4	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475500
75289-33	183191.0	Talla 5	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475524
75289-60	203933.9	Talla 2	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633047
75289-61	203934.6	Talla 3	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633061
75289-62	203936.0	Talla 4	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633085
75289-63	203937.7	Talla 5	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633108
75289-70	203929.2	Talla 2	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672138
75289-71	203930.8	Talla 3	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672152
75289-72	203931.5	Talla 4	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672176
75289-73	203932.2	Talla 5	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809475524

Clase II - 20-30 mmHg

Código de producto	Código Nacional	Tallas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	EAN Unidad
75290-20	183192.7	Talla 2	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475548
75290-21	183193.4	Talla 3	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475562
75290-22	183195.8	Talla 4	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475586
75290-23	183196.5	Talla 5	Blanco/Gris	1 unidad	1	4042809475609
75290-30	183197.2	Talla 2	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475623
75290-31	183198.9	Talla 3	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475647
75290-32	183199.6	Talla 4	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475661
75290-33	183200.9	Talla 5	Negro/Gris	1 unidad	1	4042809475685
75290-60	203942.1	Talla 2	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633122
75290-61	203944.5	Talla 3	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633146
75290-62	203945.2	Talla 4	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633160
75290-63	203946.9	Talla 5	Rosa/Gris	1 unidad	1	4042809633184
75290-70	203938.4	Talla 2	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672275
75290-71	203939.1	Talla 3	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672299
75290-72	203940.7	Talla 4	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672312
75290-73	203941.4	Talla 5	Negro/Negro	1 unidad	1	4042809672336

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, no estéril Essity Spain SLU ISO 9001:2015 ISO 13485:2016				 BSN Medical Inc. 100 Beiersdorf Drive Rutherford College, NC 28671. USA  BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburg. Germany  Distribuidor Essity Spain SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Manténgase en lugar seco



Representante autorizado



Producto no esterilizado



Distribuidor



Fabricante

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)
 Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B28451383

www.essity.es

Essity Internal